

# SELDIFLEX<sup>®</sup> HÉMO 2 et 3 LUMIERES

## Cathéter d'hémodialyse - hémofiltration

Stérile/Usage unique

Cathéter radio-opaque de voie veineuse centrale pour hémodialyse / hémofiltration, mis en place selon la méthode de Seldinger.

Cathéter avec : extrémité souple, atraumatique, marquage centimétrique (2L),  
ailette de fixation rotative pour une fixation facilitée.

Cathéter 2 lumières : 6 orifices « artériels » latéraux  
3 orifices « veineux » : latéral et distal,

Cathéter 3 lumières : 1 orifice distal,  
5 orifices « artériels » latéraux  
5 orifices « veineux » latéraux,


### Nature des composants :

- Cathéter : polyuréthane aromatique, avec embase intermédiaire munie d'ailette rotative, 2 ou 3 extensions en polyuréthane et embases de connexion luer lock en polyuréthane
- Aiguille de ponction : acier inoxydable avec embase en polyméthylpentène,
- Guide métallique spiralé J marqué double flexibilité : acier inoxydable
- Dilatateur : polyéthylène haute densité
- Pincés clamp rouge, bleu (et blanc)
- Bouchon obturateur : caoutchouc synthétique et polypropylène,
- Seringue 5 ml excentrée : polypropylène,
- Emballage rigide

**Mode de stérilisation :** ETO – Péréemption 5 ans.

**Etiquette amovible de traçabilité.**

### Cathéter 2 lumières – extension droite

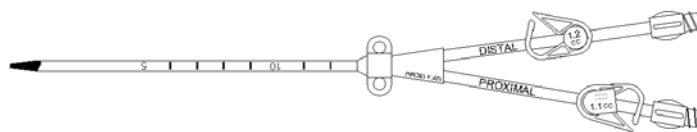

Références	Cathéter PUR			Volume mort ml		Débit ml/min		Guide souple		Aiguille		
	Long. cm	Ø ext. mm	F	Distal	Proximal	Distal	Proximal	Ø ext. mm	Long. mm	Ø ext. mm	G	Long. mm
66641J40	16	4.0	12	1.3	1.2	320	370	0.97	600	1.42	17	75
66642J40	21	4.0	12	1.5	1.4	300	350	0.97	600	1.42	17	75
66641J47	16	4.8	14	1.6	1.5	400	450	0.97	600	1.42	17	75
66642J47	20	4.8	14	1.9	1.7	390	460	0.97	600	1.42	17	75
66643J47	24	4.8	14	2.1	2.0	350	410	0.97	600	1.42	17	75

Boîte de 5 unités.


**Division PLASTIMED**

3, Rue Louis Armand  
95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

# PRODiMED


## Cathéter 2 lumières – extension courbée

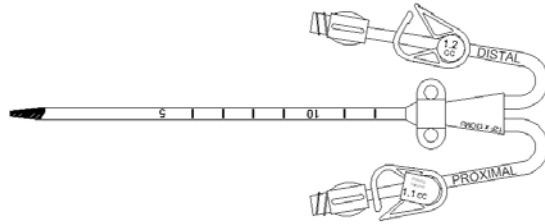

Références	Cathéter PUR			Volume mort ml			Débit ml/min			Guide souple		Aiguille		
	Long. cm	Ø ext. mm	F	Distal	Proximal	Distal	Proximal	Ø ext. mm	Long. mm	Ø ext. mm	G	Long. mm		
66641J40C	16	4.0	12	1.3	1.2	300	390	0.97	600	1.42	17	75		
66642J40C	21	4.0	12	1.5	1.4	280	350	0.97	600	1.42	17	75		
66641J47C	16	4.8	14	1.6	1.5	370	400	0.97	600	1.42	17	75		
66642J47C	20	4.8	14	1.9	1.7	350	430	0.97	600	1.42	17	75		
66643J47C	24	4.8	14	2.1	2.0	350	430	0.97	600	1.42	17	75		

Boîte de 5 unités.

## Cathéter 3 lumières

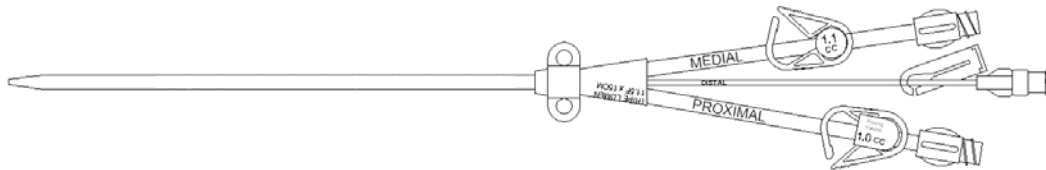

Références	Cathéter PUR			Volume mort ml			Débit ml/min			Guide souple		Aiguille		
	Long. cm	Ø ext. mm	F	Média l	Distal	Proximal	Média l	Distal	Proxim al	Ø ext. mm	Long. mm	Ø ext. mm	G	Long. mm
66751J40	15	4.0	12	1.2	0.5	1.1	300	60	290	0.89	450	1.42	17	75
66752J40	20	4.0	12	1.4	0.5	1.3	240	60	280	0.89	450	1.42	17	75

Division **PLASTIMED**  
 3, Rue Louis Armand  
 95130 Le Plessis-Bouchard  
 Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

# PRODIMED

Boîte de 5 unités.



**Division PLASTIMED**  
3, Rue Louis Armand  
95130 Le Plessis-Bouchard  
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

# **PRODiMED**