


ENDOCATH[®]

Cathéter de veine périphérique pour accès central

Stérile/Usage unique

Cathéter simple lumière pour veines périphériques avec mandrin pour insertion « à travers l'aiguille ». Les cathéters marqués tous les 5 cm, sont présentés dans une gaine protectrice pour une manipulation aseptique.

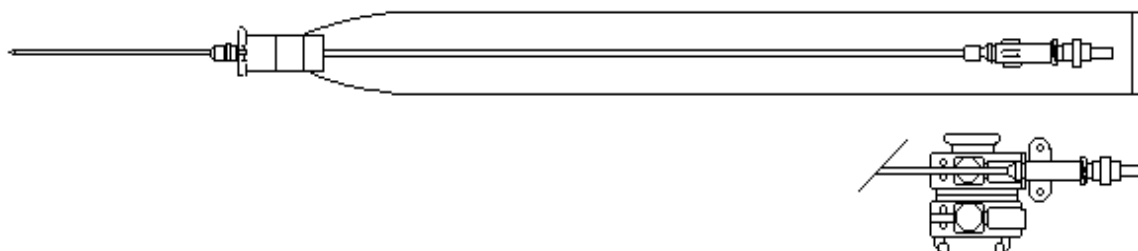

Nature des composants :

- Aiguille de ponction : acier inoxydable avec embase en polyméthylpentène,
- Gaine de protection : polyéthylène haute densité,
- Cathéter : polyuréthane aromatique radio-opaque,
- Embase à ailette : polyméthylpentène,
- Valise bleue : polypropylène,
- Protecteur d'aiguille : polypropylène,
- Emballage pelable .

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Références	Cathéter PUR				Aiguille		
	Long .cm	φ ext.mm	F	Débit ml/min	φ ext.mm	G	Long. mm
1244 13	40	1.3	4.0	18	1.72	16	50
1244 15	40	1.5	4.5	25	1.92	15	50
1244 17	40	1.7	5.0	38	2.12	14	50
1244 20	40	2.0	6.0	66	2.42	13	50
1246 15	60	1.5	4.5	16	1.92	15	50
1246 17	60	1.7	5.0	28	2.12	14	50
1246 20	60	2.0	6.0	60	2.42	13	50
1248 15	75	1.5	4.5	14	1.92	15	50
1248 17	75	1.7	5.0	20	2.12	14	50
1248 20	75	2.0	6.0	50	2.42	13	50

Boîte de 20 unités - Débit mesuré selon la norme ISO 10555-3.



Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

FT35 – Edition n°2