


SELDIFLEX® Longue Durée multilumière tunnelisable

Stérile/Usage unique

Cathéter double lumière en polyuréthane PC base, radio-opaque, avec aiguille de tunnelisation sertie, pour insertion selon la méthode de Seldinger.

Le polyuréthane aliphatique PC base, conçu pour des implantations de longue durée (> 30 jours) possède les propriétés suivantes :

- Résistance importante à l'attaque chimique des solvants et des excipients de substances antimitotiques,
- Grande résistance sous contrainte mécanique à l'attaque biologique des macrophages.

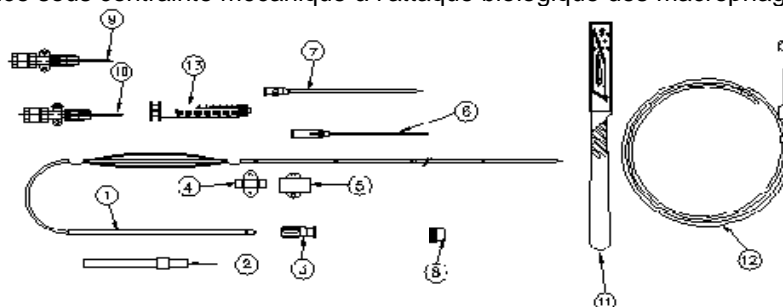

La technique reconnue de cette tunnelisation offre les avantages suivants :

- Diminution des risques d'infection sur cathéter,
- Sécurité d'un pansement occlusif,
- Améliore le confort du patient,
- Présence de repères sur les extensions arrière pour sécuriser la coupe des tubes et le montage des aiguilles mousse.

Cathéter préconisé pour chimiothérapie ou nutrition à domicile.

Nature des composants :

- Cathéter 2 Lumières 2 x 16 G : polyuréthane aliphatique PC base ORX avec aiguille de tunnelisation sertie en acier inoxydable (L=10,5 cm),
- Mandrin obturateur d'aiguille de tunnelisation : polypropylène,
- Aiguille de ponction : acier inoxydable avec embase en polyméthylpentène,
- Guide métallique J : acier inoxydable,
- Embase écrou : raccord aiguille mousse en polyméthylpentène + tube inox + écrou en polyamide,
- Ailette de fixation : SEBS + bloqueur polypropylène,
- Dilatateur : polyéthylène haute densité (L=10cm),
- Bistouri,
- Emballage barquette : PETG, operculé par un film Tyvek®.

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Précautions d'emploi : lire la notice d'instruction.

Etiquette amovible de traçabilité.

Référence	Long. cm	Cathéter PUR				Guide souple		Aiguille		
		φ ext.mm	F	Débit ml/min		φ ext.mm	Long. cm	φ ext.mm	G	Long. mm
				Distal	Prox.					
63643J23	30	2,3	7F	28	26	0,89	100	1,42	17	75

Boîte de 5 unités - Débits mesurés selon la norme ISO 10555-3.

Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchar
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08



PRODIMED

NB : Modification de la taille des aiguilles et des guides. Les modifications apparaissent en gras dans les tableaux ci-dessus (au fur et à mesure de la mise en œuvre). L'ensemble des modifications (faites et à venir) est indiqué ci-dessous, par référence.

Référence	Aiguille			Guide	
	Ø ext (mm)	Gauge	Long. (mm)	Ø ext (mm)	Long. (mm)
63643J23	1.24	18	70	0.89	1000

Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08



PRODiMED