


CATHETERS POUR THROMBECTOMIE

Stérile / Usage unique

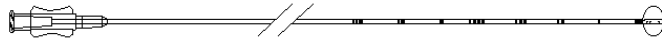

Cathéters Simple voie en polyamide, marqué tout les 10 cm et monté d'un ballonnet de forme cylindrique, avec extrémité longue et flexible.
L'extrémité permet l'introduction du cathéter sans traumatisme des valves veineuses.

Nature des composants :

- Cathéters et embase luer lock en polyamide
- Ballonnet en latex naturel pur, ligaturé par un fil polyester et collé.
- Mandrin métallique en acier inoxydable
- Emballage unitaire : canne rigide en ABS, operculée avec un bouchon muni d'un filtre Tyvek®
- Double emballage en sachet PE/TPE et PEGL
- Une identification aisée par code couleur.

Mode de stérilisation : ETO –Péremption 3 ans

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser en cas de troubles sévères de la coagulation.
- Ne pas utiliser sur le système circulatoire central.
- Ne pas exercer de traction excessive sur le dispositif.

Référence	Longueur cm	Charrière	Couleur	Ø interne mm	Ø externe mm	Volume de gonflage ml	Ø ballon gonflé mm
2240300	80	6F	Bleu	0,93	2,00	1,50	9
2240500	80	8F	Marron	1,50	2,67	2,00	11
2240100	80	10F	Gris	2,00	3,30	4,00	16

Conditionnement, individuel.



Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

FTC5 – Edition n°1