

NOUVEAUTE
UNE GAMME
ELARGIE

PRODIMED
CRITICAL CARE

SELDIFLEX[®]2
CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX

Les cathéters veineux centraux **SELDIFLEX[®]2 mono-lumière** selon la méthode Seldinger sont utilisés pour :

- L'administration de médicaments
- La mesure de la pression veineuse centrale
- Le remplissage vasculaire
- La nutrition parentérale


Les cathéters veineux centraux **SELDIFLEX[®]2 multi-lumières (2, 3, 4 lumières)** selon la méthode Seldinger sont utilisés pour :

- L'administration simultanée de médicaments incompatibles entre eux
- L'administration d'amines
- L'administration d'antibiotiques
- La mesure de la pression veineuse centrale
- Le remplissage vasculaire
- La nutrition parentérale
- La perfusion de solutions hyperosmolaires (> 700 mOsm)

Composition des sets SELDIFLEX[®]2

SELDIFLEX[®]2 • 1 Lumière

- 1 Aiguille de ponction en acier inoxydable de qualité médicale
- 1 Cathéter en PU (polyuréthane) comportant :
 - Embases de couleur pour identifier les voies. Les embases sont en polyuréthane
 - Marquage centimétrique
 - Extrémité distale effilée souple, permettant une insertion atraumatique
- 1 Guide en J avec une âme en Nitinol
- 1 Seringue de passe-guide
- 1 ou 2 dilateurs (selon les sets)
- 1 Aiguille d'anesthésie locale
- Bouchons pour les embases des différentes voies et ailettes de fixation

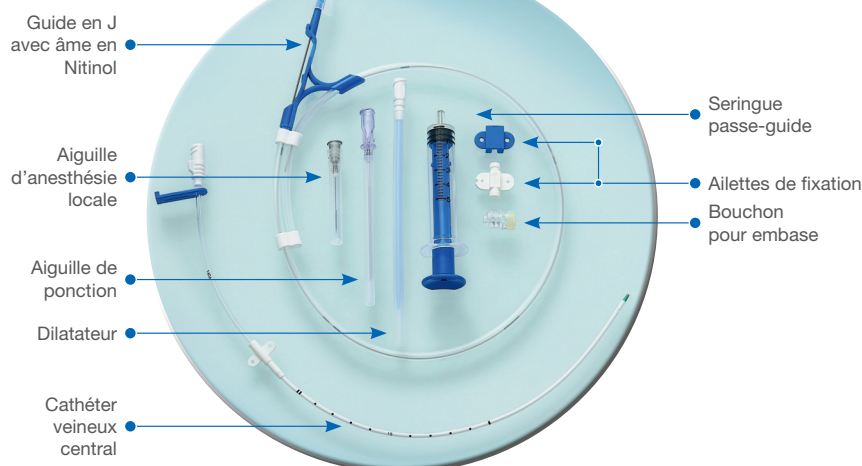

SELDIFLEX[®]2 • Monolumière Conditionnement : 10 / boîte

Dénomination	Référence Commande	Ø du cathéter	Long.* effective du cathéter	Dilatateur	Ø Aiguille de ponction (Gauge)	Long.* de l'aiguille de ponction	Guide	Lumière	Ø de la lumière (Gauge)	Débit maximal (ml/min)	Volume mort distal (ml)
Seldiflex 2 1L 5cm 2F	FV-1221	2 Fr (22G)	5 cm	4 Fr x 5 cm	20G	3,3 cm	0,018" x 50 cm	Distale	22G	15	0,144
Seldiflex 2 1L 8cm 2F	FV-1222	2 Fr (22G)	8 cm	4 Fr x 5 cm	20G	3,3 cm	0,018" x 50 cm	Distale	22G	13	0,151
Seldiflex 2 1L 5cm 3Fr	FV-1321	3 Fr (20G)	5 cm	4 Fr x 5 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale	20G	35	0,160
Seldiflex 2 1L 8cm 3F	FV-1322	3 Fr (20G)	8 cm	4 Fr x 5 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale	20G	30	0,172
Seldiflex 2 1L 10cm 3Fr	FV-1323	3 Fr (20G)	10 cm	4 Fr x 5 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale	20G	27	0,180
Seldiflex 2 1L 16cm 3Fr	FV-1325	3 Fr (20G)	16 cm	4 Fr x 5 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale	20G	23	0,190
Seldiflex 2 1L 20cm 3Fr	FV-1326	3 Fr (20G)	20 cm	4 Fr x 5 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 60 cm	Distale	20G	21	0,230
Seldiflex 2 1L 16cm 4F	FV-1425	4 Fr (18G)	16 cm	5,5 Fr x 6 cm	19G	3,8 cm	0,025" x 50 cm	Distale	18G	35	0,238
Seldiflex2 1L 20cm 4F	FV-1426	4 Fr (18G)	20 cm	5,5 Fr x 6 cm	19G	3,8 cm	0,025" x 60 cm	Distale	18G	30	0,252
Seldiflex 2 1L 30cm 4F	FV-1428	4 Fr (18G)	30 cm	5,5 Fr x 6 cm	19G	3,8 cm	0,025" x 70 cm	Distale	18G	20	0,321
Seldiflex 2 1L 16cm 5F	FV-1525	5 Fr (16G)	16 cm	6 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,032" x 50 cm	Distale	16G	65	0,373
Seldiflex 2 1L 20cm 5F	FV-1526	5 Fr (16G)	20 cm	6 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,032" x 60 cm	Distale	16G	60	0,435
Seldiflex 2 1L 30cm 5F	FV-1528	5 Fr (16G)	30 cm	6 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,032" x 70 cm	Distale	16G	55	0,498
Seldiflex 2 1L 16cm 6F	FV-1625	6 Fr (14G)	16 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,032" x 50 cm	Distale	14G	120	0,494
Seldiflex 2 1L 20cm 6F	FV-1626	6 Fr (14G)	20 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,032" x 60 cm	Distale	14G	110	0,526

*Longueur. Nouveauté

pour une mise en place par la méthode de Seldinger

SELDIFLEX®2 • 2 Lumières Conditionnement : 10 / boîte

Dénomination	Référence Commande	Ø du cathéter	Long.* effective du cathéter	Dilatateur	Ø de l'aiguille de ponction	Long.* de l'aiguille de ponction	Guide	Lumières	Ø de la lumière (Gauge)	Débit maximal (ml/min)	Volume mort (ml)
 Seldiflex 2 2L 5cm 4F	FV-2421	4 Fr (18G)	5 cm	5,5 Fr x 6 cm	20G	3,3 cm	0,018" x 50 cm	Distale Proximale	22G 22G	22 35	0,160 0,170
Seldiflex 2 2L 8cm 4F	FV-2422	4 Fr (18G)	8 cm	5,5 Fr x 6 cm	20G	3,3 cm	0,018" x 50 cm	Distale Proximale	22G 22G	25 20	0,160 0,172
 Seldiflex2 2L 13cm 4F	FV-2424	4 Fr (18G)	13 cm	5,5 F x 6 cm	20G	3,3 cm	0,018" x 50 cm	Distale Proximale	22G 22G	15 15	0,192 0,200
 Seldiflex 2 2L 10cm 5F	FV-2523	5 Fr (16G)	10 cm	6 Fr x 7 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale	18G 20G	40 30	0,181 0,161
Seldiflex 2 2L 13cm 5F	FV-2524	5 Fr (16G)	13 cm	6 Fr x 7 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale	18G 20G	35 25	0,220 0,201
 Seldiflex2 2L 16cm 5F	FV-2525	5 Fr (16G)	16 cm	6 Fr x 7 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale	18G 20G	24 24	0,210 0,230
Seldiflex 2 2L 16cm 7F	FV-2725	7 Fr (13G)	16 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035 " x 50 cm	Distale Proximale	14G 18G	110 40	0,472 0,351
Seldiflex 2 2L 20cm 7F	FV-2726	7 Fr (13G)	20 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035 " x 60 cm	Distale Proximale	14G 18G	95 40	0,505 0,366
 Seldiflex 2 2L 30cm 7F	FV-2728	7 Fr (13G)	30 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035 " x 70 cm	Distale Proximale	14G 18G	75 25	0,650 0,456
Seldiflex 2 2L 16cm 8,5F	FV-2925	8,5 Fr (12G)	16 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035 " x 50 cm	Distale Proximale	14G 14G	120 110	0,517 0,466
Seldiflex 2 2L 20cm 8,5F	FV-2926	8,5 Fr (12G)	20 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035 " x 60 cm	Distale Proximale	14G 14G	110 100	0,552 0,526
Seldiflex 2 2L 30cm 8,5F	FV-2928	8,5 Fr (12G)	30 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035 " x 70 cm	Distale Proximale	14G 14G	80 90	0,692 0,715

SELDIFLEX®2 • 3 Lumières Conditionnement : 10 / boîte

Dénomination	Référence Commande	Ø du cathéter	Long.* effective du cathéter	Dilatateur	Ø de l'aiguille de ponction	Long.* de l'aiguille de ponction	Guide	Lumières	Ø de la lumière (Gauge)	Débit maximal (ml/min)	Volume mort (ml)
 Seldiflex 2 3L 5cm 4,5F	FV-3421	4,5 Fr (17G)	5 cm	6 Fr x 5 cm & 6 Fr x 7 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale Médiale	23G 23G 20G	31 15 16	0,150 0,180 0,140
 Seldiflex 2 3L 8cm 4,5F	FV-3422	4,5 Fr (17G)	8 cm	6 Fr x 5 cm & 6 Fr x 7 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale Médiale	23G 23G 20G	31 13 12	0,180 0,170 0,190
 Seldiflex 2 3L 10cm 4,5F	FV-3423	4,5 Fr (17G)	10 cm	6 Fr x 5 cm & 6 Fr x 7 cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale Médiale	23G 23G 20G	24 11 11	0,170 0,180 0,180
Seldiflex 2 3L 8cm 5,5F	FV-3522	5,5 Fr (15G)	8 cm	6,5 Fr x 10cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale Médiale	20G 22G 22G	40 20 20	0,201 0,156 0,180
 Seldiflex 2 3L 13cm 5,5F	FV-3524	5,5 Fr (15G)	13 cm	6,5 Fr x 10cm	20G	3,3 cm	0,021" x 50 cm	Distale Proximale Médiale	22G 22G 20G	33 14 14	0,230 0,230 0,200
Seldiflex 2 3L 16cm 7F	FV-3725	7F (13G)	16 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 50 cm	Distale Proximale Médiale	16G 18G 18G	80 35 35	0,392 0,322 0,352
Seldiflex 2 3L 20cm 7F	FV-3726	7F (13G)	20 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 60 cm	Distale Proximale Médiale	16G 18G 18G	65 30 30	0,437 0,332 0,345
 Seldiflex 2 3L 30cm 7F	FV-3728	7F (13G)	30 cm	8 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 70 cm	Distale Proximale Médiale	16G 18G 18G	55 20 20	0,520 0,370 0,402
 Seldiflex 2 3L 16cm 8,5F	FV-3925	8,5 Fr (12G)	16 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 50 cm	Distale Proximale Médiale	16G 16G 14G	69 69 121	0,380 0,420 0,500
 Seldiflex 2 3L 20cm 8,5F	FV-3926	8,5 Fr (12G)	20 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 60 cm	Distale Proximale Médiale	16G 16G 14G	63 63 104	0,402 0,575 0,465
 Seldiflex 2 3L 30cm 8,5F	FV-3928	8,5 Fr (12G)	30 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 70 cm	Distale Proximale Médiale	16G 16G 14G	58 58 92	0,520 0,550 0,720

*Longueur.  Nouveauté

SELDIFLEX® 2 • 4 Lumières Conditionnement : 10 / boîte

Dénomination	Référence Commande	Ø du cathéter	Long.* effective du cathéter	Dilatateur	Ø de l'aiguille de ponction	Long.* de l'aiguille de ponction	Guide	Lumières	Ø de la lumière (Gauge)	Débit maximal (ml/min)	Volume mort (ml)
Seldiflex 2 4L 16 cm 8,5F	FV-4925	8,5 Fr (12G)	16 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 50 cm	Distale Proximale Médiale 1 Médiale 2	16G 18G 14G 18G	80 105 50 50	0,350 0,436 0,312 0,329
Seldiflex 2 4L 20cm 8,5F	FV-4926	8,5 Fr (12G)	20 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 60 cm	Distale Proximale Médiale 1 Médiale 2	16G 18G 14G 18G	65 85 35 40	0,390 0,420 0,355 0,372
Seldiflex 2 4L 30 cm 8,5F	FV-4928	8,5 Fr (12G)	30 cm	9 Fr x 10 cm	18G	6,5 cm	0,035" x 70 cm	Distale Proximale Médiale 1 Médiale 2	16G 18G 14G 18G	45 60 25 25	0,500 0,517 0,453 0,438

*Longueur.



SELDIFLEX® 2 • 2 Lumières



SELDIFLEX® 2 • 3 Lumières




SELDIFLEX® 2 • 4 Lumières



Identification des sets SELDIFLEX® 2

+ RAPIDE **+ FACILE** **+ EFFICACE** **+ SÛRE**

Version adulte

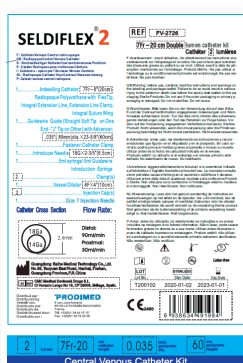


Étiquettes adultes



Barquettes adultes (Support
du guide de couleur bleue)

Version pédiatrie

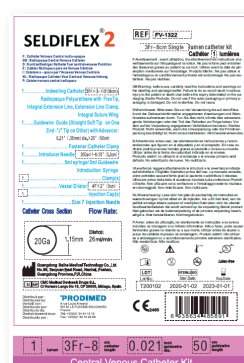

Étiquettes pédiatrie



Barquettes pédiatrie
(Support du guide translucide)

Gamme SELDIFLEX®2

Gamme complète de la pédiatrie à l'adulte. Notre gamme **SELDIFLEX®2** vous permet de choisir le dispositif le plus adéquat pour votre intervention. **SELDIFLEX®2** vous offre la possibilité d'utiliser une approche simple et sécurisée avec une technique de pose selon Seldinger.

Présentation en set

Les produits de la gamme **SELDIFLEX®2** sont toujours présentés sous forme de sets. Les emballages permettent une meilleure différenciation entre la gamme destinée aux adultes et celle destinée à la pédiatrie grâce à un code couleur, respectivement bleu et rose.

Les composants des sets


- **Guide en J avec une âme Nitinol** qui limite les risques de cathétérisme d'un petit vaisseau conduisant à un trajet aberrant.
- **Dérouleuse du guide** conçu pour faciliter le geste de préhension même dans des conditions difficiles.
- **Seringue passe-guide** pour faciliter la pose.
- **Cathéter en polyuréthane souple** facilitant la glisse lors de la pose. Le marquage centimétrique permet d'avoir un meilleur contrôle de la position du cathéter.

Matériaux

SELDIFLEX®2 est un cathéter en polyuréthane.

Le polyuréthane (PU) est un des polymères les plus polyvalents. Il possède des qualités mécaniques supérieures au silicone (entre autres, une grande flexibilité, une résistance à la plicature).

Description de la technique Seldinger

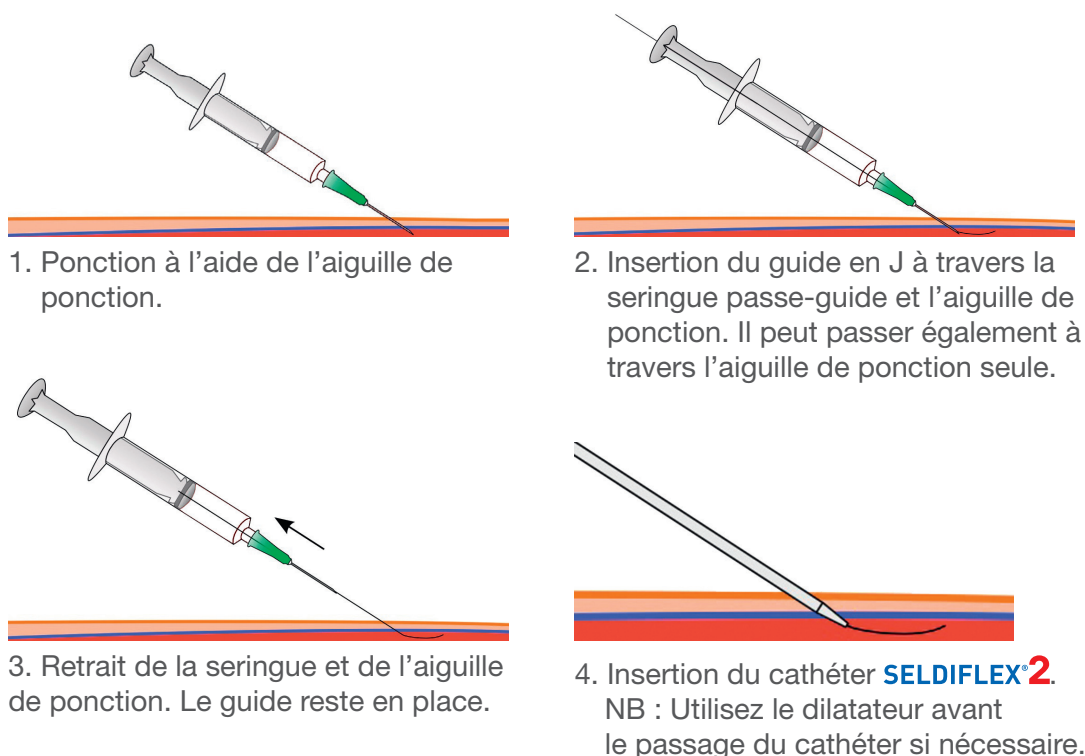

Distribué par :

PRODImED

6, rue Louis Armand 95130 Le Plessis Bouchard - France

Service Clients

Tél. : + 33 (0)1 44 95 17 00 - Fax : +33 (0)1 44 95 14 90

Email : serviceclients@ccdlab.com

www.prodimed.com

Fabriqué par :



Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.
No.89, Taoyuan East Road, Nanhai, Foshan,
Guangdong Province, P.R.China.



EMBALLAGE PELABLE - SANS LATEX - RADIO OPAQUE - DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

Dispositifs médicaux de classe III stériles - CE2460. Lire attentivement les instructions d'utilisation. Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.